




phoenix

implante dental de conexión externa
external connection dental implant

www.ilerimplant.com

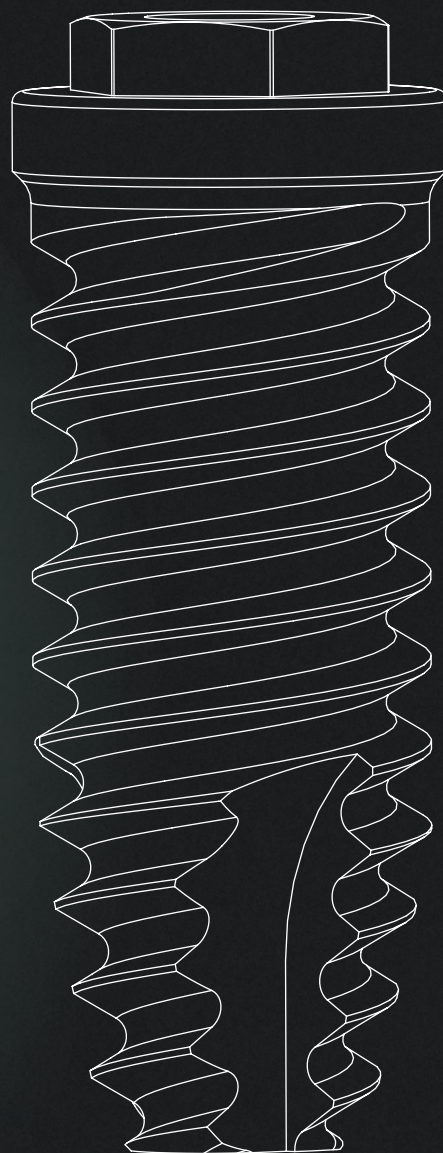


Made in Spain



phoenix

implante dental de conexión externa
external connection dental implant

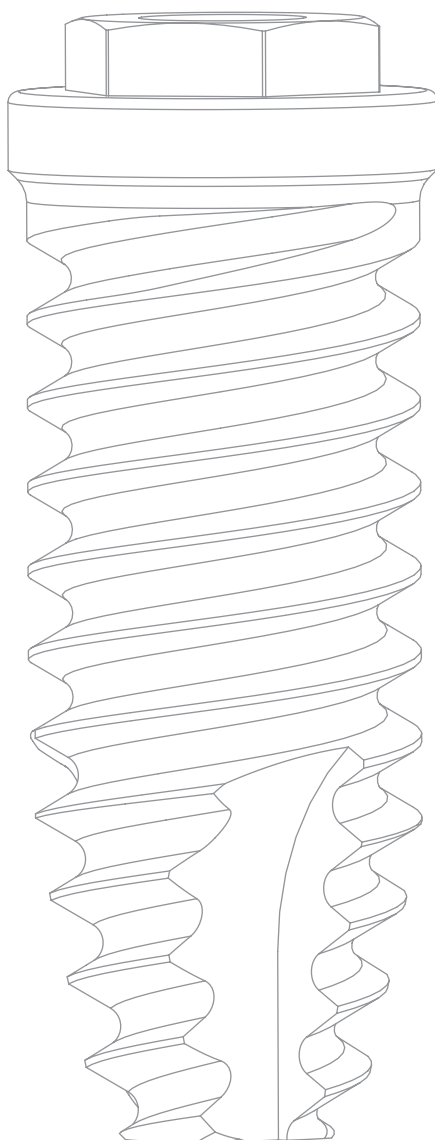

Sistema de
implantes
Implant system

Índice - Summary

SISTEMA DE IMPLANTES

- Implantes dentales gmi phoenix
- Protocolo de inserción de implantes gmi phoenix
- Gama de implantes gmi phoenix
- Secuencias fresado para implantes gmi phoenix
- Recomendaciones de uso

ADITAMENTOS

- Pilares cicatrización gmi phoenix
- Pilares inclinados estéticos gmi phoenix
- Pilares rectos gmi phoenix
- Pilares transportador fresables gmi phoenix
- Pilares bola gmi phoenix
- Pilares multi-estético gmi phoenix
- Réplicas gmi phoenix
- Tomas de impresión gmi phoenix
- Calcinables gmi phoenix
- Tornillos clínica y laboratorio gmi phoenix
- Pares recomendados de apriete
- Kit quirúrgico gmi phoenix

IMPLANT SYSTEM

- gmi phoenix dental implants 5
- Insertion sequence for gmi phoenix implants 8
- gmi phoenix implants range 9
- Drilling sequences for gmi phoenix implants 11
- Recommendations of use 12

ATTACHMENTS

- gmi phoenix healing abutments 14
- gmi phoenix esthetic angled abutments 16
- gmi phoenix straight abutments 17
- gmi phoenix millable-implant carrier abutments 18
- gmi phoenix ball abutments 19
- gmi phoenix multi-esthetic abutments 21
- gmi phoenix replicas 24
- gmi phoenix impression coping 25
- gmi phoenix castables 26
- gmi phoenix clinic and laboratory screws 28
- Recommended tightening torques 29
- gmi phoenix surgical kit 30

Implantes dentales gmi phoenix - gmi phoenix dental implants

Los implantes de conexión externa **gmi** modelo **phoenix** están mecanizados en titanio grado IV c.p. de la máxima calidad, garantizando así una gran estabilidad química y por tanto una excelente biocompatibilidad. La capa de dióxido de titanio que se forma en la superficie del implante después del proceso de pasivado, y el estudiado diseño del perfil exterior de la rosca aseguran una buena osteointegración y una elevada estabilidad.


La rosca exterior de doble entrada permite disminuir los tiempos quirúrgicos mientras que las formas redondeadas disminuyen las tensiones producidas en la interfase hueso-implante. Además, los fresados auto-roscantes y la ligera conicidad apical evitan el estrés de roscado y facilitan la penetración en el hueso y su retención inicial.

gmi phoenix external connection implants are machined in CP grade IV titanium of the highest quality, thus ensuring a high chemical stability and excellent biocompatibility. The titanium oxide layer that forms on the implant surface after the passivation process, and the careful design of the outer surface of the thread, guarantee good osseointegration and high stability.

The external dual inlet thread of the implant helps to reduce surgery time. Moreover, the rounded shapes, self-threading millings and slight tapering facilitate implant insertion, reducing tension at the bone-implant interface and thus preventing threading stress-related problems.

Características generales

Key features

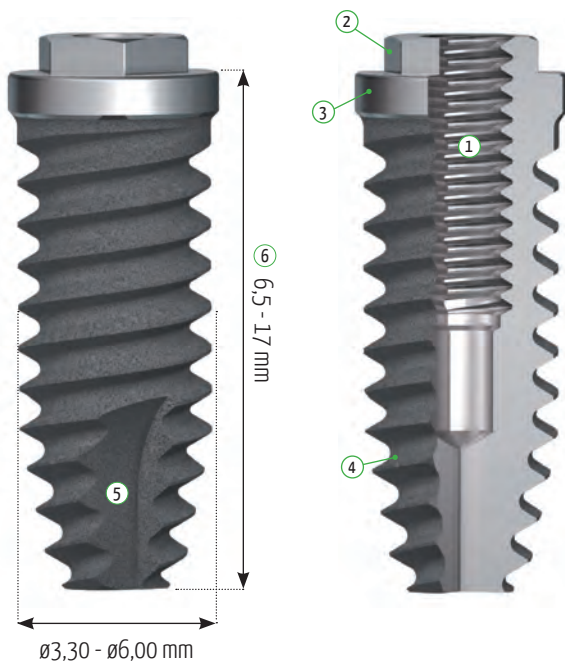

- ① **Rosca interior**
 Estrecha: M1,8 x 0,35 mm
 Estándar: M2,0 x 0,40 mm
 Ancha: M2,0 x 0,40 y M2,5 x 0,45 mm
 Extra-Ancha: M2,5 x 0,45 mm

- ② **Hexágono externo**
 Estrecha: E/C 2,40 mm x 1 mm
 Estándar: E/C 2,70 mm x 0,7 mm
 Ancha: E/C 2,70 mm x 0,7 mm
 E/C 3,40 mm x 0,7 mm
 Extra-Ancha: E/C 3,40 x 0,9 mm

- ③ **Plataforma**
 Paso 1,60 mm
 Tratamiento superficial ADS

- ⑤ **Fresados auto-roscantes**
 Longitud Variable
 3 fresados a 120°

- ⑥ **Longitudes**

- ① **Internal thread**
 Narrow: M1.8 x 0.35 mm
 Standard: M2.0 x 0.40 mm
 Wide: M2.0 x 0.40 & M2.5 x 0.45 mm
 Extra wide: M2.5 x 0.45 mm

- ② **External hexagon**
 Narrow: B/F 2.40 mm x 1 mm
 Standard: B/F 2.70 mm x 0.7 mm
 Wide: B/F 2.70 mm x 0.7 mm
 B/F 3.40 mm x 0.7 mm
 Extra wide: B/F 3.40 x 0.9 mm

- ③ **Platforms**
 1.60 mm pitch
 ADS surface treatment

- ⑤ **Self threading millings**
 Variable length
 3 millings at 120°

- ⑥ **Lengths**

	●	● ● ●	●	●
④	Ø3,30	Ø3,30-Ø3,75-Ø4,00	Ø5,00	Ø6,00
③	Ø3,30	Ø4,10	Ø5,10	Ø6,00
②	e/c · b/f - 2,40	e/c · b/f - 2,70	e/c · b/f - 2,70-3,40	e/c · b/f - 3,40
⑥	De 8 a 15 From 8 to 15	De 8 a 17 From 8 to 17	De 6,5 a 13 From 6.5 to 13	De 6,5 a 10 From 6.5 to 10






phoenix

Tratamiento superficial ADS®

ADS® surface treatment

Para favorecer la adherencia y el crecimiento de las células óseas se ha tratado la superficie exterior del implante con el exclusivo sistema ADS® (Advanced Double-Grip Surface) que combina un microbulado con corindón blanco con un ataque ácido para obtener una rugosidad no uniforme, que maximiza la superficie de contacto entre el implante y el hueso y por tanto, mejora la estabilidad y la unión entre ellos.

To promote the adhesion and growth of bone cells, the outer surface of the implant has been treated with the exclusive ADS® treatment (Advanced Double-Grip Surface) which combines a white corundum micro-bubble treatment and acid etching, for a non-smooth roughness that maximizes the contact surface between implant and bone and therefore improves stability and adhesion between them.

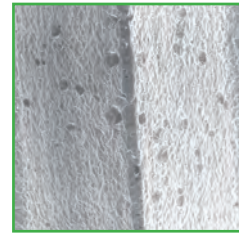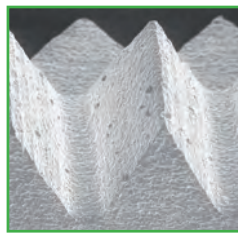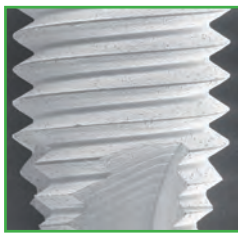

El tratamiento ADS® es el resultado de una serie de colaboraciones con institutos y universidades, así como estudios y ensayos propios que nos permiten controlar y validar la respuesta biológica óptima de la superficie del implante: se han efectuado tanto estudios químicos (estudios de dispersión rayos X para conocer la composición del implante y su superficie) como topográficos (estudios de rugosidad), así como estudios biológicos (estudios de respuesta in vivo en animales) y estudios clínicos.


The ADS® treatment is the result of a series of collaborations with institutes and universities, as well as our own research and tests, that allow us to monitor and validate the optimal biological response to the implant surface: chemical (X-ray scattering studies to find out the composition of the implant and its surface) and topography studies (roughness studies) have been carried out, as well as biological (in vivo response studies in animals) and clinical studies.

Estudios de composición

Composition studies

Los estudios efectuados por dispersión de rayos X demuestran que sobre la superficie del implante solo se encuentra titanio y oxígeno, que son los componentes básicos de la capa de óxido que se forma en el proceso de pasivado del implante, y que es la que le confiere la excelente resistencia a la corrosión.

X-ray scattering studies show that the surface of the implants is only made up of titanium and oxygen, which are the basic components of the oxide layer that forms in the implant passivation process and that gives it its excellent corrosion resistance.

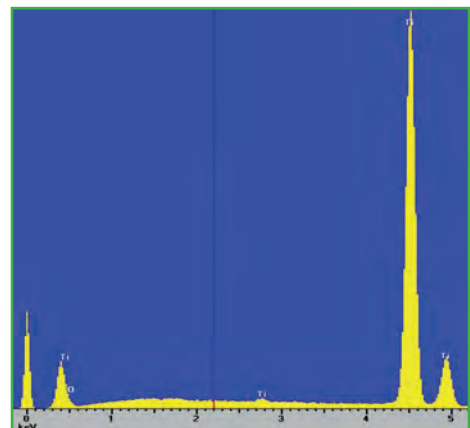


Estudios de la topografía de la superficie

Surface topography studies

Para controlar y conocer la topografía de la superficie del implante, se han efectuado estudios de rugosidad tanto con rugosímetros de contacto, como con técnicas SEM (Scanning Electron Microscope) y CLSM (Confocal Laser Scanning Microscope), permitiéndonos obtener y controlar los valores de la media aritmética de la rugosidad (Ra) dentro de los parámetros recomendados en las publicaciones internacionales.

In order to control and identify the topography of the implant surface, roughness studies were performed with profilometer, as well as with techniques such as SEM (Scanning Electron Microscope) and CLSM (Confocal Laser Scanning Microscope), allowing to obtain and control the mean roughness (Ra) values within the parameters recommended in international publications.

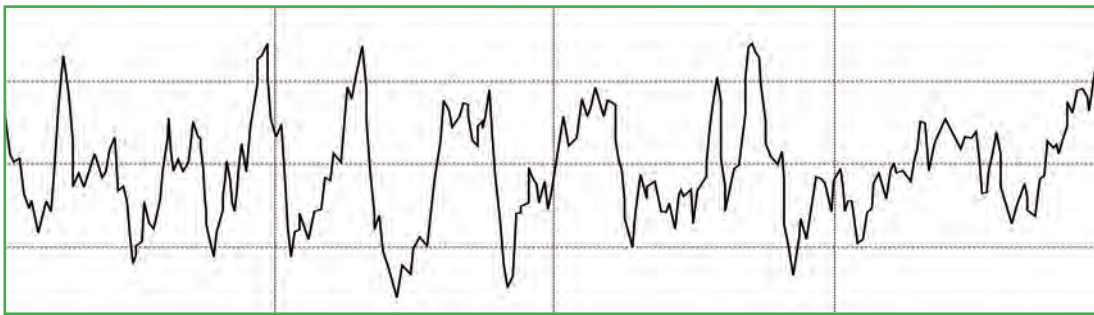




Perfil de rugosidad obtenido con HOMMEL-WERKE T1000 • Roughness profile obtained with HOMMEL-WERKE T1000.

Estudios de osteointegración

Osseointegration studies

Para conocer la respuesta biológica de los implantes GMI, se han efectuado estudios in vivo colocando los implantes en animales, dejándolos sin carga durante el proceso de cicatrización y efectuando un estudio histológico que demuestra la excelente respuesta de las células óseas y la osteointegración completa del implante.

To determine the biological response of GMI implants, in vivo studies were conducted by inserting the implants on animals, leaving them without load during the healing process and performing a histological study to prove the excellent response of the bone cells and the complete osseointegration of the implant.

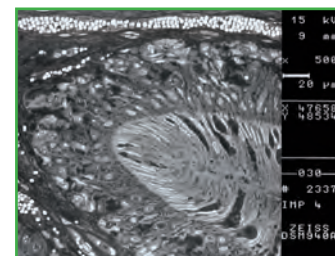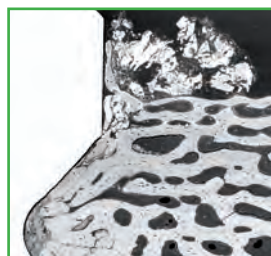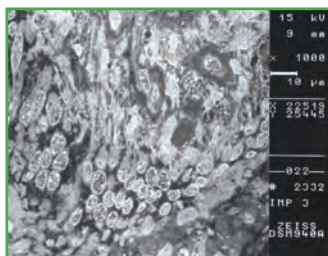

SEM-BSE: detalles ultraestructurales de las células en biofilm sobre el implante. • SEM-BSE: ultrastructural details of cells in biofilm on the implant.

Protocolo de inserción de implantes gmi phoenix - Insertion sequence for gmi phoenix implants

Los implantes de conexión externa **gmi phoenix** vienen presentados en una caja de cartón serigrafiada, en cuyo interior se encuentran las instrucciones de uso, las etiquetas de trazabilidad y un doble envase que contiene el sistema de implantes, siendo el envase secundario de plástico técnico y el envase primario de vidrio Pyrex para asegurar el comportamiento inerte del envase. Una vez envasados en sala blanca, son esterilizados mediante radiación gamma según normativa.

El nuevo sistema de envasado de los implantes **gmi phoenix** consta de un soporte de titanio donde se aloja únicamente el conjunto implante-transportador preparado para ser introducido directamente en boca, utilizando una única llave transportador, diseñada a tal efecto. Este nuevo sistema presenta las siguientes ventajas para el profesional: un mayor control y una mejor visibilidad del proceso de inserción del implante, una mayor facilidad de uso en espacios interdentes reducidos y una reducción en el tiempo de cirugía.

gmi phoenix external connection implants come in a screen-printed cardboard box, with the instructions for use, traceability labels and a double packaging containing the implant system, with the primary and secondary Pyrex glass packaging to ensure the inert performance of the container. Once packaged in a clean room, they are sterilized with gamma radiation according to regulations.

The new packaging system of the **gmi phoenix** implants consists of a titanium support which only houses the implant-implant carrier set, prepared to be inserted directly into the mouth, using a single hex-3.00 mm implant carrier wrench, designed for this purpose. This new system offers the odontologist the following advantages: more control and a better view of the implant insertion process, it is easier to use in reduced interdental spaces and a reduction in surgery time.



1. Comprobar pegatina indicadora de diámetro y longitud del implante y abrir la pestaña de la caja de cartón.
2. Extraer el envase secundario, las instrucciones de uso y las etiquetas identificativas del producto.
3. Comprobar integridad del precinto de seguridad y desenroscar el tapón del envase secundario.
4. Extraer el envase primario del envase secundario evitando golpearlo contra una superficie rígida.
5. Extraer y guardar el tapón del envase primario, efectuando un movimiento lateral.
6. Introducir la llave-transportador HEX-3,00 mm hasta notar una ligera retención, encarando las marcas de la llave con las caras del hexágono del implante.
7. Comprobar que la llave está totalmente insertada y efectuar un pequeño giro mientras se estira con suavidad el conjunto.
8. Colocar el implante en el lecho óseo aplicando un par máximo de 35 N-cm hasta que la parte tratada quede a nivel crestal o subcrestal. Extraer la llave.
9. Desatornillar el tornillo clínica y desmontar el transportador efectuando un pequeño giro si es necesario.
10. Extraer el tapón de cierre del tapón primario, utilizando la llave de HEX-0,80 mm para los tapones de cierre para plataforma Ø3,30 y la llave de HEX-1,20 mm para el resto de plataformas.
11. Roscar el tapón de cierre al implante aplicando un par máximo de 15 N-cm. Extraer llave y suturar incisión.

1. Check sticker indicating implant diameter and length and open the tab on the carton.
2. Remove the secondary packaging, instructions for use and product identification labels.
3. Check the integrity of the safety seal and unscrew the plug on the secondary packaging.
4. Remove the primary packaging from the secondary packaging avoiding hitting it against a hard surface.
5. Extract and save the primary packaging plug making a lateral movement.
6. Insert the HEX-3.00 mm implant carrier wrench until a slight retention is noticed, addressing the notches on the key with the faces of the implant hex broaching.
7. Check that the key is fully inserted and turn slightly while gently pulling on the assembly.
8. Place the implant in the bone bed by applying a maximum torque of 35 N-cm until the treated area is at the crestal or subcrestal level. Remove the key.
9. Unscrew the clinic screw and dismount the implant carrier by turning slightly if necessary.
10. Remove the cover screw from the primary packaging plug, using the HEX-0.80 mm ratchet wrench for Ø3.30 platform and HEX-1.20 mm for the other platforms.
11. Screw the cover screw to the implant by applying a maximum torque of 15 N-cm. Remove key and suture incision.

Gama de implantes gmi phoenix - gmi phoenix implants range



Implantes phoenix de plataforma ø3,30 mm phoenix implants with ø3.30 mm platform

L (mm)	ø3,30 mm
8,00	KDA OF 0097
10,00	KDA OF 0098
11,50	KDA OF 0099
13,00	KDA OF 0100
15,00	KDA OF 0101



Implantes phoenix de plataforma ø4,10 mm phoenix implants with ø4.10 mm platform

L (mm)	ø3,30 mm	ø3,75 mm	ø4,00 mm
8,00	KDA OF 0001	KDA OF 0007	KDA OF 0013
10,00	KDA OF 0002	KDA OF 0008	KDA OF 0014
11,50	KDA OF 0003	KDA OF 0009	KDA OF 0015
13,00	KDA OF 0004	KDA OF 0010	KDA OF 0016
15,00	KDA OF 0005	KDA OF 0011	KDA OF 0017
17,00	KDA OF 0006	KDA OF 0012	KDA OF 0018



Implantes phoenix de plataforma ø5,10 mm phoenix implants with ø5.10 mm platform

L (mm)	Hex. 2,70-ø5,00 mm	Hex. 3,40-ø5,00 mm
6,50	KDA OF 0114	KDA OF 0115
8,00	KDA OF 0019	KDA OF 0089
10,00	KDA OF 0020	KDA OF 0090
11,50	KDA OF 0021	KDA OF 0091
13,00	KDA OF 0022	KDA OF 0092



Implantes phoenix de plataforma ø6,00 mm phoenix implants with ø6.00 mm platform

L (mm)	ø6,00 mm
6,50	KDA OF 0116
7,50	KDA OF 0102
10,00	KDA OF 0103


Secuencias fresado para implantes gmi phoenix - Drilling sequences for gmi phoenix implants

A continuación se describen las secuencias de fresado para los diferentes modelos de implantes de conexión externa y las condiciones de corte aconsejadas para su uso:


- Fresa lanceolada: 1200 - 1500 rpm.
- Fresa piloto: 900 - 1200 rpm.
- Fresa guía: 800 rpm.
- Fresas finales:
 - Ø2,80 mm → 500 - 700 rpm.
 - Ø3,00 y Ø3,50 mm → 400 - 700 rpm.
 - Ø4,25 mm → 400 - 600 rpm.
 - Ø5,10 y Ø5,40 mm → 300 - 500 rpm.
- Para fresar es necesario disponer de refrigeración externa con solución salina.

Following is a description of the drilling sequences for the different external connection implant models, as well as the recommended drilling conditions for their use.

- Lance-shaped: 1200 - 1500 rpm
- Pilot drill: 900 - 1200 rpm
- Guide drill: 800 rpm
- Twist drills:
 - Ø2.80 mm → 500 - 700 rpm.
 - Ø3.00 and Ø3.50 mm → 400 - 700 rpm.
 - Ø4.25 mm → 400 - 600 rpm.
 - Ø5.10 and Ø5.40 mm → 300 - 500 rpm.
- For drilling, external cooling with saline solution is required.

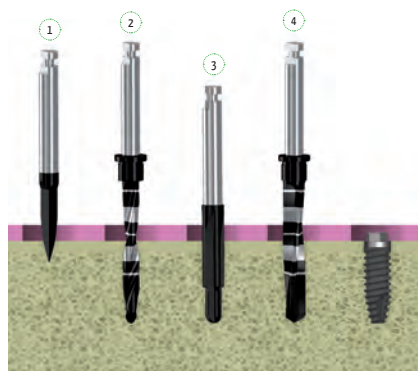


phoenix Ø3,30		
	Descr.	Ref.
1 Fresa lanceolada	Lance-shaped drill	KYF OC 1224
2 Fresa piloto	Pilot drill	KYF OC 2221
3 Fresa guía	Guide drill	KYF OC 3227
4 Fresa Ø2,80 mm	Twist drill Ø2.80 mm	KYF OC 0128

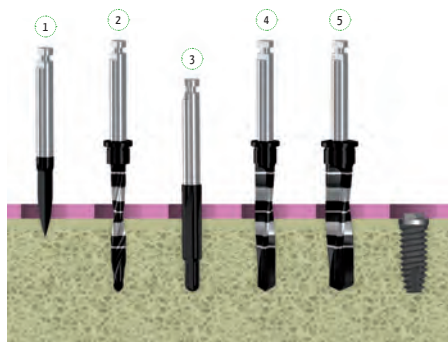


phoenix Ø3,75		
	Descr.	Ref.
1 Fresa lanceolada	Lance-shaped drill	KYF OC 1224
2 Fresa piloto	Pilot drill	KYF OC 2221
3 Fresa guía	Guide drill	KYF OC 3227
4 Fresa Ø2,80 mm	Twist drill Ø2.80 mm	KYF OC 0128
5 Fresa Ø3,25 mm	Twist drill Ø3.25 mm	KYF OC 0132

Secuencias fresado para implantes gmi phoenix - Drilling sequences for gmi phoenix implants

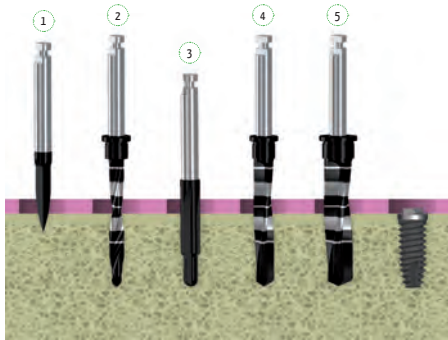

phoenix ø4,00		
	Descr.	Ref.
1	Fresa lanceolada	Lance-shaped drill
2	Fresa piloto	Pilot drill
3	Fresa guía	Guide drill
4	Fresa ø2,80 mm	Twist drill ø2.80 mm
5	Fresa ø3,50 mm	Twist drill ø3.50 mm

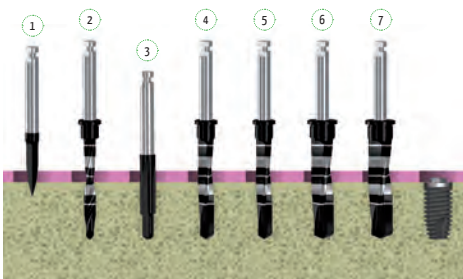

phoenix ø5,00		
	Descr.	Ref.
1	Fresa lanceolada	Lance-shaped drill
2	Fresa piloto	Pilot drill
3	Fresa guía	Guide drill
4	Fresa ø2,80 mm	Twist drill ø2.80 mm
5	Fresa ø3,00 mm	Twist drill ø3.00 mm
6	Fresa ø3,50 mm	Twist drill ø3.50 mm
7	Fresa ø4,25 mm	Twist drill ø4.25 mm




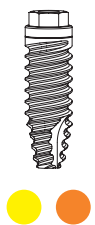
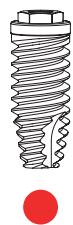
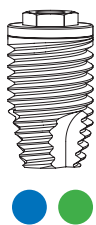
phoenix ø6,00		
	Descr.	Ref.
1	Fresa lanceolada	Lance-shaped drill
2	Fresa piloto	Pilot drill
3	Fresa guía	Guide drill
4	Fresa ø2,80 mm	Twist drill ø2.80 mm
5	Fresa ø3,00 mm	Twist drill ø3.00 mm
6	Fresa ø3,50 mm	Twist drill ø3.50 mm
7	Fresa ø4,25 mm	Twist drill ø4.25 mm
8	Fresa ø5,10 mm	Twist drill ø5.10 mm
9	Fresa ø5,40 mm	Twist drill ø5.40 mm


* El proceso recomendado por ILERIMPLANT no puede sustituir el criterio y la experiencia del cirujano. - * Procedure recommended by ILERIMPLANT cannot replace the judgment and the experience of the surgeon.

Recomendaciones de uso - Recommendations of use

La gama de implantes **gmi** modelo **phoenix** ha sido diseñada y testada para ser colocada como restauración unitaria, con una inclinación máxima de 30 grados respecto al plano perpendicular al plano oclusal, según el siguiente diagrama.


The **gmi phoenix** implant range was designed and tested to be inserted as a single restoration, with a 30-degree maximum inclination to the perpendicular plane to the occlusal plane, in accordance with the following diagram.

	 Ø3,30-Ø3,75 mm Incisivos (Excepto centrales maxilares) Incisors (Except central maxillary incisors)	 Ø4,00 mm Caninos • Canines Premolares • Premolars Incisivos centrales maxilares Central maxillary incisors	 Ø5,00-Ø6,00 mm Molares Molars
---	---	--	---

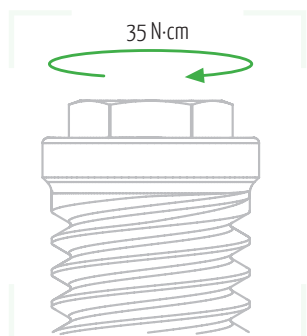


Los implantes GMI modelo PHOENIX han sido diseñados para ser insertados aplicando un par de apriete de 35-40 N-cm, aunque pueden soportar un par máximo de apriete de 60 N-cm. GMI recomienda la inserción manual del implante con la llave de carraca dinamométrica para asegurar que no se sobrepasan estos valores.

The GMI PHOENIX implant range is designed to be inserted applying a 35-40 N-cm torque, although it can bear a maximum tightening torque of 60 N-cm. GMI recommends manual insertion of the implant with a dynamometric ratchet wrench to ensure that these values are not exceeded.

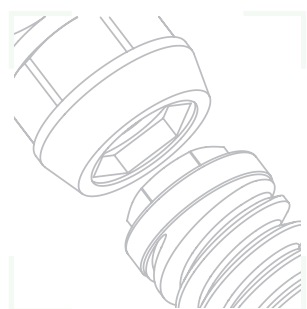

La gama de implantes y aditamentos protésicos GMI modelo PHOENIX, han sido diseñados y fabricados con unas tolerancias estudiadas para mantener unos ajustes que minimizan el juego entre los componentes, y por tanto la estabilidad de la conexión. GMI recomienda utilizar aditamentos originales para asegurar el perfecto ajuste entre los componentes de la restauración.

The GMI PHOENIX range of implants and prosthetic attachments are designed and manufactured with tolerances intended to maintain adjustments that minimize the clearance between components and therefore the stability of the connection. GMI recommends the use of original attachments to ensure a perfect fit between the components of the restoration.

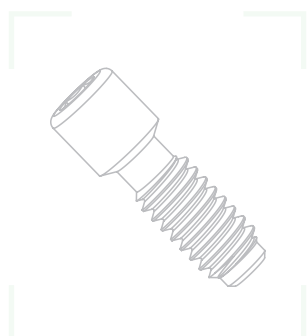


Para evitar deformaciones previas del tornillo clínica, GMI recomienda reservar su uso únicamente para el apriete definitivo de la prótesis. Para realizar los ajustes de la fase protésica se recomienda utilizar el tornillo laboratorio.

To prevent prior deformation of the clinic screw, GMI recommends restricting its use only for the final tightening of the prosthesis. To make adjustments during the prosthetic procedures, use of the laboratory screw is recommended.



phoenix

implante dental de conexión externa
external connection dental implant

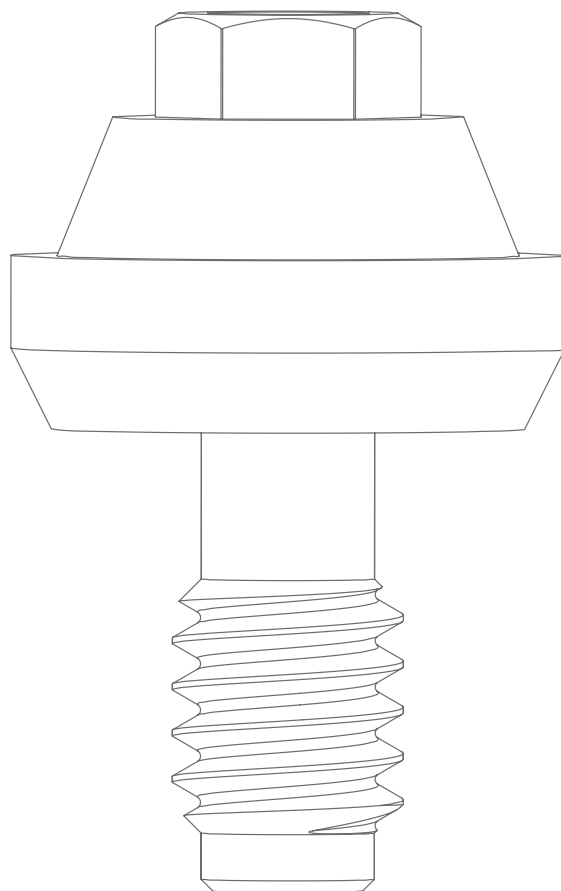

Aditamentos
Attachments

Pilares de cicatrización gmi phoenix - gmi phoenix healing abutments

Una vez finalizada la fase de reparación de los tejidos de sostén del implante, en el caso de implantes cubiertos total o parcialmente por tejido blando, debe existir un canal o túnel mucoso que permita la conexión del implante a la estructura secundaria o prótesis. Los pilares de cicatrización son los encargados de formar esta vía mucosa una vez se ha abierto por incisión el tejido blando, se ha retirado el tapón de cierre y han sido roscados al implante.

Características principales

- Mecanizados en titanio grado V según norma ISO-5832.
- Apriete con llave hexagonal de e/c 1,20 mm.
- Apriete alternativo con destornillador de punta plana.
- Disponibles en alturas de emergencia de 2,00 a 5,00 mm.
- Ligera conicidad de la cabeza para facilitar la extracción.
- Mecha apical para facilitar el inicio de roscado.

Once the repair phase of the tissue supporting the implant has finished, in the case of implants fully or partially covered by soft tissue there must be a mucosal channel or tunnel enabling connection of the implant to the prosthesis or secondary structure. Healing abutments are used to form the mucosal route, once the soft tissue has been opened by incision and the cover screw has been withdrawn, by screwing them to the implant.

Key features

- Grade V titanium machining as per ISO-5832 standard.
- Tightening with b/f 1.20 mm hex wrench.
- Alternative tightening with a flat tip screwdriver.
- Available in emergency heights from 2.00 to 5.00 mm.
- Slightly tapered in the head to facilitate extraction.
- Apical bit to facilitate the start of threading.



Pilares de cicatrización para plataforma Ø3,30 mm Healing abutments for Ø3.30 mm platform

Hex. impl.	Altura (mm) Height (mm)	Ref.
◇ 2,40 mm	2,00	KDP OC 0023
	3,00	KDP OC 0024
	4,00	KDP OC 0025
	5,00	KDP OC 0026

Pilares de cicatrización para plataforma Ø4,10 mm Healing abutments for Ø4.10 mm platform

Hex. impl.	Altura (mm) Height (mm)	Ref.
◇ 2,70 mm	2,00	KDP OC 0005
	3,00	KDP OC 0006
	4,00	KDP OC 0007
	5,00	KDP OC 0008



Pilares de cicatrización para plataforma Ø5,10 mm
Healing abutments for Ø5.10 mm platform

Hex. impl.	Altura (mm) Height (mm)	Ref.
○ 2,70 mm	2,00	KDP OC 0011
	3,00	KDP OC 0013
	4,00	KDP OC 0015
	5,00	KDP OC 0017
○ 3,40 mm	2,00	KDP OC 0012
	3,00	KDP OC 0014
	4,00	KDP OC 0016
	5,00	KDP OC 0018



Pilares de cicatrización para plataforma Ø6,00 mm
Healing abutments for Ø6.00 mm platform

Hex. impl.	Altura (mm) Height (mm)	Ref.
○ 3,40 mm	2,00	KDP OC 0029
	3,00	KDP OC 0030
	4,00	KDP OC 0031
	5,00	KDP OC 0032

Pilares inclinados estéticos gmi phoenix - gmi phoenix esthetic angled abutments

Cuando es necesario corregir una posición angular extrema del implante en el interior de la estructura ósea, en relación a las piezas naturales o implantes adyacentes, se utilizarán los pilares inclinados que, una vez montados y orientados sobre el implante, permitirán la paralelización de la nueva corona con el resto de estructuras.

Características principales

- Mecanizados en titanio grado V según norma ISO-5832.
- Permiten corregir disparelismos de hasta 20 grados.
- Interior de 12 posiciones para una mayor flexibilidad.
- Tornillo clínica incluido.
- Hombro del pilar adaptado a la forma de la encía.

When it is necessary to correct an extreme angular position of the implant inside the bone structure in relation to adjacent natural or prosthetic teeth, angled abutments should be used, that once mounted and oriented on the implant will allow the parallelization of the new crown with other structures.

Key features

- Grade V titanium machining as per ISO-5832 standard.
- Allow non-parallelism correction up to 20 degrees.
- 12-position interior for increased flexibility.
- Clinic screw included.
- Abutment shoulder adapted to the shape of the gum.



Pilares inclinados estéticos para plataforma Ø3,30 mm Esthetic angled abutments for Ø3.30 mm platform

Hex. impl.	Tipo conexión Connection type	Ang. (°)	Ref.
⬡ 2,40 mm	Antir. • Non-rot.	15°	KDM of 0060
	Antir. • Non-rot.	20°	KDM of 0069

Pilares inclinados estéticos para plataforma Ø4,10 mm Esthetic angled abutments for Ø4.10 mm platform

Hex. impl.	Tipo conexión Connection type	Ang. (°)	Ref.
⬡ 2,70 mm	Antir. • Non-rot.	15°	KDM of 0002
	Antir. • Non-rot.	20°	KDM of 0070

Pilares inclinados estéticos para plataforma Ø5,10 mm Esthetic angled abutments for Ø5.10 mm platform

Hex. impl.	Tipo conexión Connection type	Ang. (°)	Ref.
⬡ 2,70 mm	Antir. • Non-rot.	15°	KDM of 0008
	Antir. • Non-rot.	20°	KDM of 0071
⬡ 3,40 mm	Antir. • Non-rot.	15°	KDM of 0014
	Antir. • Non-rot.	20°	KDM of 0072

Pilares rectos gmi phoenix - gmi phoenix straight abutments

Una vez formado el túnel mucoso por el pilar de cicatrización y retirado este de su localización, se procede a utilizar el pilar correspondiente, que se define como el aditamento mecanizado cónico que una vez fijado con el tornillo clínica a la parte superior del implante sirve de soporte para la corona clínica fijándose a ésta mediante la utilización de cemento.

Características principales

- Mecanizados en titanio grado V según norma ISO-5832.
- Planos anti-rotatorios para facilitar la retención.
- Pilares rectos en versión rotatoria y anti-rotatoria hexagonal.
- Tornillo clínica incluido.

Once the mucosal tunnel has been formed by the healing abutment and after removing the cap from this location, it is appropriate to use the abutment, which is defined as the machined tapered attachment that, after being fixed with the clinic screw to the top of the implant, acts as a support for the clinic crown and is attached to it using cement.

Key features

- Grade V titanium machining as per ISO-5832 standard.
- Anti-rotational planes to increase retention.
- Straight abutments in hex rotary and non-rotary version.
- Clinic screw included.



Pilares rectos para plataforma ø3,30 mm Straight abutments for ø3.30 mm platform

Hex. impl.	Tipo conexión Connection type	Ref.
⬡ 2,40 mm	Antir. • Non-rot.	KDM OF 0058



Pilares rectos para plataforma ø4,10 mm Straight abutments for ø4.10 mm platform

Hex. impl.	Tipo conexión Connection type	Ref.
⬡ 2,70 mm	Antir. • Non-rot.	KDM OF 0034



Pilares rectos para plataforma ø5,10 mm Straight abutments for ø5.10 mm platform

Hex. impl.	Tipo conexión Connection type	Ref.
⬡ 2,70 mm	Antir. • Non-rot.	KDM OF 0035
⬡ 3,40 mm	Antir. • Non-rot.	KDM OF 0036

Pilares rectos gmi phoenix - gmi phoenix straight abutments



Pilares rectos para plataforma ø6,00 mm Straight abutments for ø6.00 mm platform

Hex. impl.	Tipo conexión Connection type	Ref.
⊕ 3,40 mm	Antir. • Non-rot.	KDM OF 0062

Pilares transportador fresables gmi phoenix - gmi phoenix millable-implant carrier abutments

Cuando sea necesario utilizar un pilar a medida se utilizarán los pilares fresables, que permitirán, mediante el corte en cualquier dirección, adecuarse a las necesidades del protésico. Además y como función complementaria, los pilares transportador fresables pueden ser utilizados como toma de impresión, roscándolos al implante mediante el tornillo de impresión corto y utilizándolos para hacer el negativo de la boca del paciente y su posterior positivación en escayola.

Características principales

- Mecanizados en titanio grado V según norma ISO-5832.
- Permiten corte en cualquier dirección adecuándose a las necesidades protésicas.
- Compatibles con llave hexagonal de e/c 4,00 mm para utilizar como transportador.
- Disponibles sólo en versión anti-rotatoria.
- Posibilidad de utilizarlos como toma de impresión con tornillo impresión corto.
- Tornillo clínica incluido.

When the use of a custom abutment is required, millable abutments can be used. By cutting them in any direction, they can be suited to the needs of the prosthetic. In addition and as a complementary function, millable transfer abutments can be used like impression coping, threading them to the implant screw through the short impression screw and using them to make the negative of the patient's mouth for subsequent positivation on plaster.

Key features

- Grade V titanium machining as per ISO-5832 standard.
- They allow cutting in any direction to suit the needs of the prosthetic.
- Compatible with b/f 4.00 mm hex wrench for use as a implant carrier.
- Available only in non-rotary version.
- Possibility to use as impression coping with short impression screw.
- Clinic screw included.



Pilares fresables para plataformas ø3,30 / 4,10 / 5,10 / 6,00 mm Millable abutments for ø3.30 / 4.10 / 5.10 / 6.00 mm platforms

Hex. impl.	Plataforma Platform	Ref.
⊕ 2,40 mm	ø3.30	KDB OF 0004
⊕ 2,70 mm	ø4.10	KDB OF 0001
	ø5.10	KDB OF 0002
	ø5.10	KDB OF 0003
⊕ 3,40 mm	ø6.00	KDB OF 0005

Pilares bola gmi phoenix - gmi phoenix ball abutments

Una vez formado el túnel mucoso por el pilar de cicatrización, y retirado este de su localización, se procede a utilizar el pilar bola correspondiente, que se define como el aditamento mecanizado que una vez fijado a la parte superior del implante sirve de elemento retentivo de la prótesis removible, la cual lleva incorporados previamente los casquillos de retención que se fijarán en la parte esférica superior de los pilares bola.

Características principales

- Mecanizados en titanio grado V según norma ISO-5832.
- Disponibles en alturas de emergencia de 1,50 a 3,00 mm.
- Cofia de retención rosa y contenedor incluidos.
- Disco de protección incluido.
- Apriete con llave hexagonal de e/c 2,45 mm ref: KYL OC 0065.
- Instrumental para cofias: Mango universal (RH124ICP), Insertador de cofias (RH185IAC) y Extractor de cofias (RH091EC).

Once the healing abutment has formed the mucosal tunnel and the healing abutment has been removed from this location, the corresponding ball abutment is used, which is defined as a machined attachment being fixed to the top of the implant and serving as the retention element for the removable prosthesis, with the previous addition of the retention caps that will be fixed to the top spherical part of the ball abutment.

Key features

- Grade V titanium machining as per ISO-5832 standard.
- Available in emergency heights from 1.50 to 3.00 mm.
- Pink retention cap and metal container included.
- Protection disk included.
- Tightening with b/f 2.45 mm hex wrench, part no.: KYL OC 0065.
- Instruments for caps: Universal handle (RH124ICP), Insertion tool for caps (RH185IAC) and Removal tool for caps (RH091EC).



Pilares bola para plataforma ø4,10 mm Ball abutment for ø4.10 mm platform		
Hex. impl.	Altura (mm) Height (mm)	Ref.
○ 2,70 mm	3,00	KDF OF 0045
	2,50	KDF OF 0046
	2,00	KDF OF 0047
	1,50	KDF OF 0048



Pilares bola para plataforma ø5,10 mm Ball abutment for ø5.10 mm platform		
Hex. impl.	Altura (mm) Height (mm)	Ref.
○ 3,40 mm	3,00	KDF OF 0049
	2,50	KDF OF 0050
	2,00	KDF OF 0051
	1,50	KDF OF 0052
○ 2,70 mm	3,00	KDF OF 0053
	2,50	KDF OF 0054
	2,00	KDF OF 0055
	1,50	KDF OF 0056



Pilares bola gmi phoenix - gmi phoenix ball abutments



Retenciones Retention caps			
Tipo retención Retainer type	Color	Cantidad (ud.) Quantity (un.)	Ref.
Suave • Soft	Rosa • Pink	6	RH40CRNSN
Fuerte • Strong	Verde • Green	6	RH040CRN
Elástica • Elastic	Naranja • Orange	6	RH049PCN

Contenedor cofias Metalic container	
Cantidad (ud.) Quantity (un.)	Ref.
2	RH041CANB

Discos protección Protection disks	
Cantidad (ud.) Quantity (un.)	Ref.
10	RH100PD

Pilares multi-estético gmi phoenix - gmi phoenix multi-esthetic abutments

Una vez efectuada la primera etapa de la cirugía, y por tanto obtenida la osteointegración del implante, se procede a utilizar el pilar multi-estético (PME), que se define como el aditamento mecanizado que una vez fijado a la parte coronal del implante sirve como soporte de una restauración múltiple, disminuyendo la altura entre la conexión del implante y la conexión de la estructura, y facilitando el ajuste pasivo de la estructura.

Características principales

- Mecanizados en titanio grado V según norma ISO-5832.
- Disponibles en alturas de emergencia de 1,50 a 4,50 mm.
- Pilares rectos de una sola pieza en versión rotatoria.
- Apriete con llaves hexagonales:
PL-Ø3,30 y Ø4,10: E/C 2,00 mm (KYL OC 0097)
PL-Ø5,10: E/C 2,50 mm (KYL OC 0098)
- Toma de impresión con tornillo incluido.
- Calcinable con tornillo clínica incluido.
- Cilindro provisional en titanio grado V según ISO-5832, con tornillo clínica incluido.
- Los PME inclinados permiten corregir disparelismos de hasta 30 grados.

Following the first stage of surgery and therefore after implant osseointegration is achieved, the multi-esthetic abutment (MEA) is used, that is defined as the machined attachment that, after being attached to the crown of the implant, serves as a support for a multiple restoration, thus decreasing the height between the implant connection and the structure connection, and providing a passive adjustment of the structure.

Key features

- Grade V titanium machining as per ISO-5832 standard.
- Available in emergency heights from 1.50 to 4.50 mm.
- One-piece straight abutments in rotary model.
- Tightened with hex keys:
PL-Ø3.30 and Ø4.10: B/F 2.00 mm (KYL OC 0097)
PL-Ø5.10: B/F 2.50 mm (KYL OF 0098)
- Impression coping with screw included.
- Castable with clinic screw included.
- Temporary cylinder in grade V titanium with clinic screw included.
- Angled multi-esthetic abutments allow non-parallelism up to 30°.



Pilares multi-estético inclinados para plataformas Ø3,30 / Ø4,10 mm Angled MEA for Ø3.30 / Ø4.10 mm platforms

Plataforma Platform	Hex. impl.	Ang. (°)	Altura (mm) Height (mm)	Ref.
Ø3,30	⬡ 2,40 mm	17°	2,50	KDG OF 0030
		17°	2,50	KDG OF 0031
Ø4,10	⬡ 2,70 mm	17°	3,50	KDG OF 0032
		30°	4,50	KDG OF 0033

Pilares multi-estético gmi phoenix - gmi phoenix multi-esthetic abutments



Pilares multi-estético rectos para plataforma Ø3,30 mm
Straight MEA for Ø3.30 mm platform

Hex. impl.	Altura (mm) Height (mm)	Ref.
⊕ 2,40 mm	1,50	KDG OC 0016
	2,50	KDG OC 0017
	3,50	KDG OC 0018
	4,50	KDG OC 0019



Pilares multi-estético rectos para plataforma Ø4,10 mm
Straight MEA for Ø4.10 mm platform

Hex. impl.	Altura (mm) Height (mm)	Ref.
⊕ 2,70 mm	1,50	KDG OC 0012
	2,50	KDG OC 0013
	3,50	KDG OC 0014
	4,50	KDG OC 0015



Pilares multi-estético rectos para plataforma Ø5,10 mm
Straight MEA for Ø5.10 mm platform

Hex. impl.	Altura (mm) Height (mm)	Ref.
⊕ 2,70 mm	1,50	KDG OC 0020
	2,50	KDG OC 0021
	3,50	KDG OC 0022
	4,50	KDG OC 0023
⊕ 3,40 mm	1,50	KDG OC 0024
	2,50	KDG OC 0025
	3,50	KDG OC 0026
	4,50	KDG OC 0027

Pilares multi-estético gmi phoenix - gmi phoenix multi-esthetic abutments



Pilares cicatrización ME
ME healing caps

Plataforma Platform	Ref.
ø4,80	KDP OF 0035
ø6,00	KDP OF 0036



Tomas impresión ME
ME impression coping

Plataforma Platform	Ref.
ø4,80	KDS OF 0015
ø6,00	KDS OF 0016



Cilindros provisionales ME
ME temporary cylinders

Plataforma Platform	Ref.
ø4,80	KDG OF 0028
ø6,00	KDG OF 0029



Calcinables ME
ME castables

Plataforma Platform	Ref.
ø4,80	KDC OF 0117
ø6,00	KDC OF 0118

Réplicas gmi phoenix - gmi phoenix replicas

Una vez realizada la transferencia de la posición mediante la toma de impresión del medio biológico al modelo de trabajo de laboratorio, es necesario utilizar las réplicas, que se definen como el aditamento mecanizado destinado por una parte a reproducir la posición del implante en la boca del paciente a un modelo de trabajo y por otra a servir de modelo de conexión para la construcción en el laboratorio de la estructura destinada a efectuar la restauración.

Características principales

- Réplicas mecanizadas en acero inoxidable de alta calidad.
- Fresados anti-giro y cuello de retención vertical para una buena fijación.

Once the transfer of the position has been made using the impression coping from the biological medium to the laboratory working model, it is necessary to use replicas, which are defined as the machined attachments designed on one hand to reproduce the implant position in the mouth of the patient to a working model, and on the other to serve as a connection model for the construction in the laboratory of the structure to carry out the restoration.

Key features

- Machined replicas in high quality stainless steel.
- Anti-rotation millings and vertical retention neck for a good fixation.



Réplicas de implante para plataformas ø3,30 / 4,10 / 5,10 / 6,00 mm Implant replicas for ø3.30 / 4.10 / 5.10 / 6.00 mm platforms

Hex. impl.	Plataforma (mm) Platform (mm)	Ref.
○ 2,40 mm	ø3,30	KDR oC 0010
○ 2,70 mm	ø4,10	KDR oC 0002
	ø5,10	KDR oC 0006
○ 3,40 mm	ø5,10	KDR oC 0008
	ø6,00	KDR oC 0011

Réplicas para pilar multi-estético MEA replicas

Plataforma Platform	Ref.
ø4,80	KDR oC 0012
ø6,00	KDR oC 0013

Tomas de impresión gmi phoenix - gmi phoenix impression coping

Las tomas de impresión se definen como el aditamento mecanizado que conexasiónado a la parte coronal del implante en el interior de la cavidad bucal, y fijado axialmente mediante el tornillo de impresión, sirve para realizar la transferencia de la posición del implante en el medio biológico a un modelo de laboratorio, sobre el cual trabajará el protésico para crear las coronas o prótesis dentales. Este proceso se consigue utilizando materiales de impresión que colocados de forma apropiada, se endurecen en la cavidad bucal permitiendo la obtención del negativo de la boca del paciente. Una vez extraído, se colocan las réplicas y se efectúa el vaciado de escayola para obtener el molde positivo donde la réplica quedará en la posición original del implante en boca.

Características principales

- Toma impresión CA mecanizada en titanio grado V según norma ISO-5832.
- Tornillos de impresión mecanizados en titanio grado V según norma ISO-5832.
- Apriete tornillos impresión con llave hexagonal de e/c 1,20 mm.
- Mecha apical para facilitar el inicio de roscado.
- Fresados anti-giro y cuello de retención vertical para una buena fijación.
- Tornillos de toma de impresión incluidos.
- Tornillo largo con fresados longitudinales para apriete manual.
- Toma de impresión CC mecanizada en plástico técnico.

Impression coping are defined as the machined attachments that, connecting to the coronal part of the implant within the oral cavity and axially fixed by the impression screw, is used to make the transfer of the position of the implant in the biological medium to a laboratory model, on which the prosthetic will work to create the dental crowns or prostheses. This process is achieved using impression materials placed in an appropriate manner, that will harden in the oral cavity and produce the negative of the patient's mouth. Once extracted, replicas are placed and the casting plaster is poured to obtain the positive mould where the replica will be placed in the original position of the implant in the mouth.

Key features

- Machined open tray impression coping in grade V titanium according to ISO-5832.
- Impression screws in grade V titanium according to ISO-5832.
- Tightening of impression screws with b/f 1.20 mm hex wrench.
- Apical bit to facilitate the start of threading.
- Anti-rotation millings and vertical retention neck for a good fixation.
- Impression coping screw included.
- Long impression screw with longitudinal millings for manual tightening.
- Closed tray impression coping machined in technical plastic.



Tomas impresión cubeta abierta (CA) plataforma Ø3,30 mm Open tray (OT) impression coping for Ø3.30 mm platform

Hex. impl.	Tornillo Screw	Ref.
⊕ 2,40 mm	Largo • Long	KDS OF 0007
	Corto • Short	KDS OF 0012



Tomas impresión cubeta abierta (CA) plataforma Ø4,10 mm Open tray (OT) impression coping for Ø4.10 mm platform

Hex. impl.	Tornillo Screw	Ref.
⊕ 2,70 mm	Largo • Long	KDS OF 0002
	Corto • Short	KDS OF 0009

Tomas de impresión gmi phoenix - gmi phoenix impression coping



Tomas impresión cubeta abierta (CA) plataforma ø5,10 mm
Open tray (OT) impression coping for ø5.10 mm platform

Hex. impl.	Tornillo Screw	Ref.
⊕ 2,70 mm	Largo • Long	KDS OF 0004
	Corto • Short	KDS OF 0010
⊕ 3,40 mm	Largo • Long	KDS OF 0006
	Corto • Short	KDS OF 0011



Tomas impresión cubeta abierta (CA) plataforma ø6,00 mm
Open tray (OT) impression coping for ø6.00 mm platform

Hex. impl.	Tornillo Screw	Ref.
⊕ 3,40 mm	Largo • Long	KDS OF 0008
	Corto • Short	KDS OF 0013



Tomas impresión cubeta cerrada (CC)
Closed tray (CT) impression coping

Cantidad (Ud.) Quantity (Un.)	Ref.
5	KDS OF 0014

Calcinables gmi phoenix - gmi phoenix castables

Para sustituir una corona dental con una prótesis de restauración se utiliza el calcinable, que se define como el aditamento mecanizado de plástico fundible que una vez posicionado sobre la parte coronal del implante de conexión externa servirá de base inicial para modelar la forma que tendrá la estructura final, que será colada en el metal correspondiente.

Características principales

- Calcinables mecanizados en material plástico fundible de color blanco.
- Fisiológicamente inertes y excelente estabilidad dimensional.
- Disponibles en versión rotatoria y anti-rotatoria.

To replace a dental crown with a restoration dental prosthesis, a castable is used, which is defined as a meltable plastic machined attachment that, once positioned over the coronal part of the external connection implant, will be the initial basis to model the form of the final structure, to be cast in the corresponding metal.

Key features

- Machined castables in white meltable plastic material.
- Physiologically inert and excellent dimensional stability.
- Available in rotary and non-rotary version.

Calcinables gmi phoenix - gmi phoenix castables



Calcinables para plataforma Ø3,30 mm Castables for Ø3.30 mm platform

Hex. Impl.	Tipo conexión Connection type	Ref.
○ 2,40 mm	Anti-rotatoria • Non-rotary	KDC OF 0115
	Rotatoria • Rotary	KDC OF 0116



Calcinables para plataforma Ø4,10 mm Castables for Ø4.10 mm platform

Hex. Impl.	Tipo conexión Connection type	Ref.
○ 2,70 mm	Anti-rotatoria • Non-rotary	KDC OF 0101
	Rotatoria • Rotary	KDC OF 0105



Calcinables para plataforma Ø5,10 mm Castables for Ø5.10 mm platform

Hex. Impl.	Tipo conexión Connection type	Ref.
○ 2,70 mm	Anti-rotatoria • Non-rotary	KDC OF 0102
	Rotatoria • Rotary	KDC OF 0104
○ 3,40 mm	Anti-rotatoria • Non-rotary	KDC OF 0108
	Rotatoria • Rotary	KDC OF 0109



Calcinables para plataforma Ø6,00 mm Castables for Ø6.00 mm platform

Hex. Impl.	Tipo conexión Connection type	Ref.
○ 3,40 mm	Anti-rotatoria • Non-rotary	KDC OF 0103
	Rotatoria • Rotary	KDC OF 0110

Tornillos clínica y laboratorio gmi phoenix - gmi phoenix clinic and laboratory screws

Los tornillos clínica se definen como los aditamentos mecanizados utilizados para el anclaje definitivo de los pilares, el transportador o el calcinable directo al implante, mientras que los tornillos de laboratorio son los aditamentos mecanizados utilizados para el anclaje provisional de los calcinables a la réplica del implante, utilizados por el protésico en el laboratorio donde se construyen las coronas dentales o prótesis.

Características principales

- Tornillos clínica mecanizados en titanio grado V según norma ISO-5832.
- Tornillos de laboratorio mecanizados en acero inoxidable de alta calidad.
- Apriete tornillos con llave hexagonal de e/c 1,20 mm.
- Mecha apical para facilitar el inicio de roscado.
- Tornillo laboratorio con regata para diferenciarlo del tornillo clínica.

Clinic screws are defined as mechanical devices used for the final anchoring of the abutments, the transfer or the castable directly to the implant, while laboratory screws are the mechanical devices used for the temporary anchoring of castables to the replica of the implant used by the dental lab where the construction of dental crowns or prostheses takes place.

Key features

- Machined grade V titanium clinic screws according to ISO-5832.
- Machined laboratory screws in stainless steel quality.
- Tightening or screws with b/f 1.20 mm hex wrench.
- Apical bit to facilitate the start of threading.
- Laboratory screw with groove to differ it from clinic screw.



Tornillos clínica Clinic screws		
Hex. llave (mm) Hex. wrench (mm)	Rosca (mm) Thread (mm)	Ref.
◇ 1,20 mm	M2,0x0,40	KDT 0C 0030
	M2,5x0,45	KDT 0C 0037
	M1,8x0,35	KDT 0C 0045

Tornillos laboratorio Laboratory screws		
Hex. llave (mm) Hex. wrench (mm)	Rosca (mm) Thread (mm)	Ref.
◇ 1,20 mm	M2,0x0,40	KDT 0C 0004
	M2,5x0,45	KDT 0C 0038
	M1,8x0,35	KDT 0C 0050

Tornillos clínica ME ME clinic screws	
Plataforma Platform	Ref.
ø4,80	KDT 0C 0056
ø6,00	KDT 0C 0060

Pares recomendados de apriete - Recommended tightening torques

Apriete tapones de cierre y pilares de cicatrización • Healing abutments and cover screw tightening torque



Apriete tornillos clínica • Clinic screw tightening torque



Apriete pilares bola • Ball abutments tightening torque



Apriete pilares multi-estético • Multi-esthetic abutments tightening torque



Apriete tornillos multi-estético • Multi-esthetic screw tightening torque



Apriete tornillo impresión • Impression coping screw tightening torque



Apriete pilares multi-estético inclinado • Angled multi-esthetic abutments tightening torque



Kit quirúrgico gmi phoenix - gmi phoenix surgical kit

El kit quirúrgico gmi phoenix está formado por una caja autoclavable fabricada en resina técnica de alta resistencia, que contiene todo el material necesario para la correcta colocación del sistemas de implantes dentales de conexión externa gmi phoenix. Los componentes se encuentran dispuestos de tal manera que sea sencillo encontrar en cada momento el instrumento necesario para cada fase de la intervención.

Los kits quirúrgicos gmi se distribuyen en cajas confeccionadas en polímero técnico de alta resistencia y deben esterilizarse en autoclave de calor húmedo antes de su uso a una temperatura máxima de 134°C.

gmi phoenix surgical kit consists of an autoclavable case made of high strength resin, containing all the necessary material for the correct positioning of gmi phoenix external connection dental implant system. The components are arranged in such a way as to be easy to find, at all times, the necessary instrument at any time for each stage of the intervention.

gmi surgical kits are distributed in cartons, made of high strength technical polymer, and should be steam autoclaved before use at a maximum temperature of 134°C.

KYC OF 3009




	Descr.	Un.	Ref.
Fresa lanceolada	Lance-shaped drill	1	KYF OC 1224
Fresa piloto ø2,00 mm	Pilot drill ø2.00 mm	1	KYF OC 2221
Fresa guía ø2,00 / ø2,70 mm	Guide drill ø2.00 / ø2.70 mm	1	KYF OC 3227
Fresa final ø2,80 mm	Twist drill ø2.80 mm	1	KYF OC 0128
Fresa final ø3,00 mm	Twist drill ø3.00 mm	1	KYF OC 0130
Fresa final ø3,25 mm	Twist drill ø3.25 mm	1	KYF OC 0132
Fresa final ø3,50 mm	Twist drill ø3.50 mm	1	KYF OC 0135
Fresa final ø4,25 mm	Twist drill ø4.25 mm	1	KYF OC 0143
Fresa final ø5,10 mm	Twist drill ø5.10 mm	1	KYF OC 0151
Fresa final ø5,40 mm	Twist drill ø5.40 mm	1	KYF OC 0154
Llave transportador plana 45°	Manual wrench 45°	1	KYL OC 0093
Llave carraca IP	TI ratchet wrench	1	KYL OF 0113
Llave-transportador HEX - 3,00 mm IP corta	Short HEX-3.00 mm implant carrier TI wrench	1	KYL OF 0123
Llave-transportador HEX - 3,00 mm IP larga	Long HEX-3.00 mm implant carrier TI wrench	1	KYL OF 0124
Llave-transportador HEX - 3,00 mm CA	HEX-3.00 mm implant carrier HP wrench	1	KYL OF 0122
Llave fija HEX - 1,20 mm manual	HEX-1.20 mm fixed manual wrench	1	KYL OC 0011
Llave carraca corta HEX - 1,20 mm	Short HEX-1.20 mm ratchet wrench	1	KYL OF 0128
Llave carraca larga HEX - 1,20 mm	Long HEX-1.20 mm ratchet wrench	1	KYL OF 0129
Llave fija HEX - 0,80 mm manual	HEX-0.80 mm fixed manual wrench	1	KYL OC 0092
Alargador llaves CA	HP tip extender	1	KYL OC 0023
Paralelizador ø2,00 / ø2,80 mm	Paralleling pin ø2.00 / ø2.80 mm	3	KYL OC 0078
Medidor profundidad ø2,80 mm	Depth gauge ø2.80 mm	1	KYL OC 0094
Medidor profundidad ø3,50 mm	Depth gauge ø3.50 mm	1	KYL OC 0095



phoenix

implante dental de conexión externa
external connection dental implant

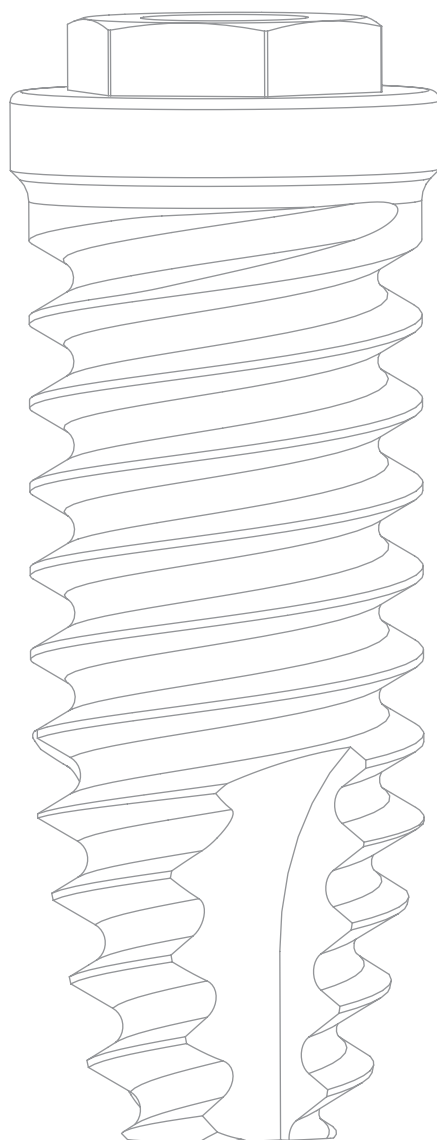

Distribuido por:
Distributed by:



ilerimplant S.L.

Pol. Ind. El Segre
C/ Enginyer Mies 705-B
25191 Lleida (SPAIN)
Tel. (+34) 973 184 350
Fax (+34) 973 183 278
www.ilerimplant.com